

CAS KIT

Das Crestal Approach Sinus Surgery Kit ermöglicht ein Sinuslifting ohne Membranperforation. Es besteht aus patentierten konischen Inversbohrern und gewährleistet eine einfachere und sicherere Anhebung der Sinusmembran. Zahnärzte profitieren von vorhersagbaren Ergebnissen, reduzierter operativer Komplexität und erhöhter Patientensicherheit bei anspruchsvollen Eingriffen im posterioren Oberkieferbereich.



VERRINGERTES

PERFORATIONSRSIKO

Die abgerundete Schneidkante des Bohrers verringert die Wahrscheinlichkeit einer Perforation der Schneider-Membran.




AN UNTERSCHIEDLICHE ANATOMIEN ANPASSBAR

Die umgekehrt konische Bohrerspitze ermöglicht eine effektive Anwendung, egal ob der Sinusboden flach, geneigt oder in der Nähe von Septen liegt.




HYDRAULISCHER MEMBRANLIFT


Ein speziell entwickelter Membranheber ermöglicht eine abgedichtete Osteotomie, indem er mithilfe von Kochsalz-Hydraulikdruck die Sinusmembran sicher anhebt.

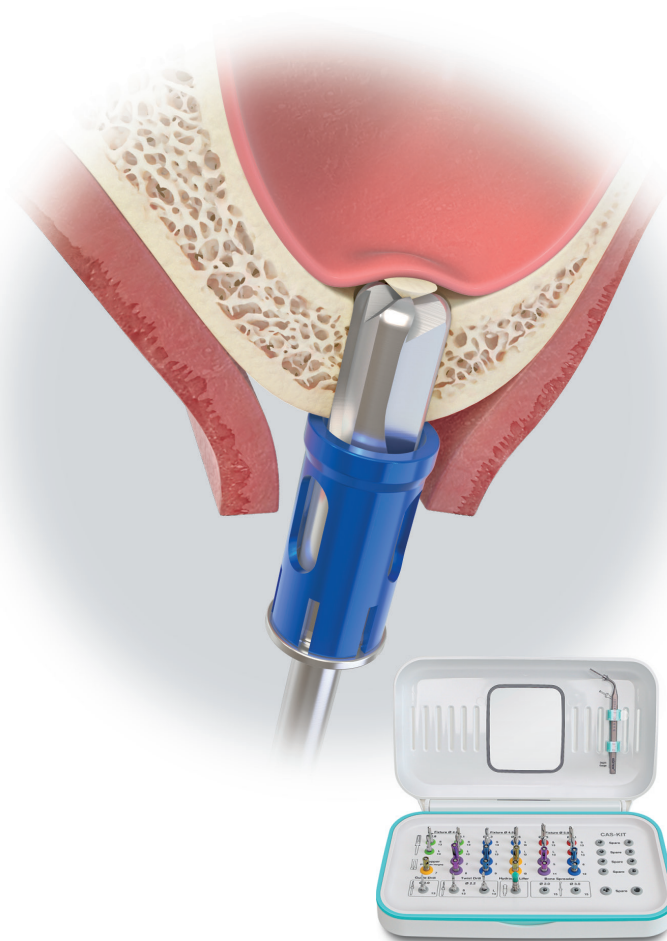


Anwendungsbeispiel

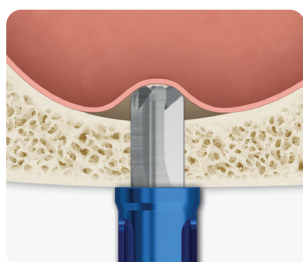


Flach

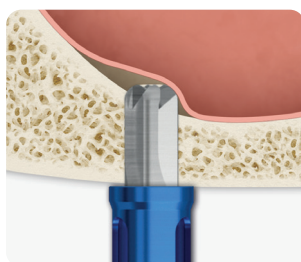

Geneigt

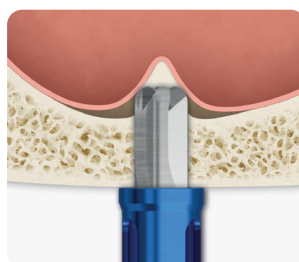

Septum

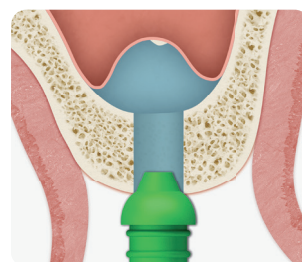

Hydraulische Sinusmembranhebung

SSIII

TW30B



OSDG

